

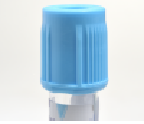








ANALYSES	Nbre de tubes à prélever	TYPE DE TUBE
		CHOIX OPTIMAL
NF- RETICULOCYTES - VS	1	
HBA1C	1	
Groupe sanguin 2 déterminations/RAI (identification manuscrite complète +++)	2	
FOLATES ERYTHROCYTAIRES	1	
BNP	1	
COAGULATION TP, TCA, Fibrinogène, D.Dimères. Anti-Xa HBPM : stabilité < 6h Héparinémie : stabilité < 2h sur citrate (AT3, PC/PS, anti-PF4, ACC, facteurs : plasma PPP à congeler < 1h +++)	1 tube rempli au trait de jauge IMPERATIVEMENT	
FACTEUR V : centrifugation et congélation dans les 4h après le prélèvement XARELTO et ELIQUIS : Urgences TA < 2h	1 tube rempli au trait de jauge IMPERATIVEMENT	
BIOCHIMIE (hors lithium et glycémie) CRP, fer/ferritine/transferrine/CST, Na, K, Cl, RA, acide urique, albumine, CPK, urée, créatinine (MDRD), Ca, protides, transaminases, GGT, PAL, bilirubine, lipase, bilan lipidique, Mg, Ig G/A/M, TROPONINE, MYOGLOBINE, NT-PROBNP, PCT (procalcitonine) Attention : LDH, phosphore (stabilité <4h à TA)	1	 avec gel séparateur
IMMUNOMETRIE + CHIMIE SPECIALISEE Vit.D, anti -TG, anti-TPO, T3L, T4 L, TSH Attention : THYROCALCITONINE à faire au laboratoire Phadiatop, Trophatop, CLAP/T, RAST (IgE spécif.) Auto-immunité : ACAN, ANCA, ACADN, ECT, TISSUS Lithium, Tegretol, Depakine, Phénobarbital, Vancomycine, Gentamicine FSH, LH, Estradiol, prolactine, progestérone, AMH (HN), testostérone Folates sériques, Vit B12, Cortisol sérique (8h++), PCT (procalcitonine) Attention : C-peptide, insuline, PTH, IgE totales (stabilité <8h à TA) PSA /PSAL, ACE, AFP, CA125, CA19.9, CA 15.3, Lyme, WBLyme, CMV, EBV, VIH, Toxo, Rubéole, hépatites ABCDE, Chlamydia trachomatis ELEC, IELEC, facteur rhumatoïde (Latex/Waaler-Rose), anti-CCP, syphilis (BW = TPHA/VDRL), Attention : CRYOGLOBULINE à faire au laboratoire THYROGLOBULINE : stabilité <4h à TA Nouveau : haptoglobine, pré-albumine	1 (si < 3 analyses) ou 2 (si > 2 analyses)	 ou 
GLYCEMIE (STABILITE 24H A TA), ALCOOL LACTATES A FAIRE AU LABORATOIRE	1	

L'ensemble des préconisations pré-analytiques, est disponible sur le manuel de prélèvement du laboratoire

<https://home.ubilab.io/biopyrenees>